

TGS速溶颗粒

Catalog Number: PR20020

产品介绍

Tris-Glycine-SDS (以下简称 TGS) 为白色至类白色速溶颗粒, 每袋 TGS 速溶颗粒可配制 0.5 L 1× TGS 缓冲液, 操作简便, 使用方便。TGS 的主要成分是 Tris、甘氨酸和 SDS, 1× TGS 缓冲液中含有的 Tris 的浓度为 25 mM、甘氨酸的浓度为 192 mM, SDS 的含量为 0.1%。TGS 缓冲液常用作 SDS-PAGE 时的电泳缓冲液。

产品成分

组分	规格
Tris-Glycine-SDS	50 袋

注: 配制成 1× 溶液后的 pH 值为 $8.3 \pm 0.2 @ 25^{\circ}\text{C}$ 。

包装规格


50 袋

保存条件

室温

使用方法

- 量取约 300 mL 的蒸馏水加入烧杯, 并放置一个磁性搅拌子于烧杯中。
- 将烧杯置于磁力搅拌器上, 慢慢加入 1 袋 TGS 速溶颗粒的全部内容物, 搅拌溶液直至完全溶解。
- 向步骤 2 的 TGS 溶液中加入蒸馏水, 定容至 0.5 L, 即为 1×。

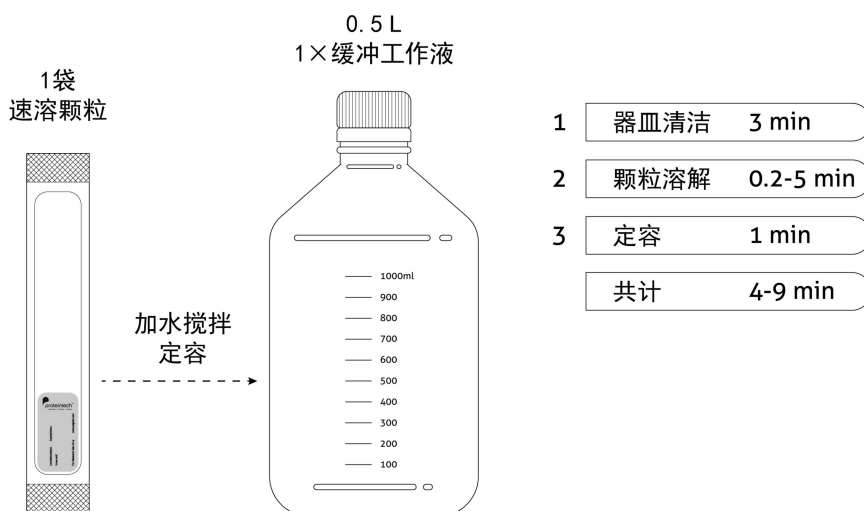

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 027-87531629 E: Proteintech-CN@ptglab.com W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.